


Kontakt os gerne for mere
information eller undervisning
på din afdeling

39 66 16 44 / info@opitek.dk

ELEKTRISK RINGSKÆRER

EN HANDY ENHÅNDSBETJENT FINGERRINGSKÆRER,
DER ER HURTIG, NEM OG SIKKER AT ANVENDE

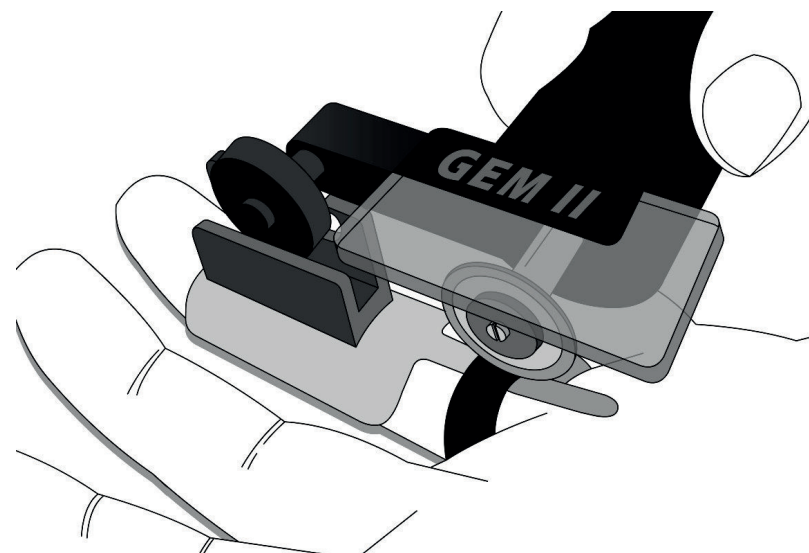

GEM II kan skære igennem hårde metaller, som vil være umulige at skære igennem med en manuel ringskærer.

I modsætning til den manuelle ringskærer kan **GEM II**'s unikke skæreblade klare fingerringe, der er op til 20 mm brede og 5 mm tykke i en uafbrudt skæring.

GEM II er anvendelig på akutklinikker, skadestuer, traumecentre samt ambulancer



Egenskaber

- Effektiv, nem og sikker at anvende
- Skærer hurtigt igennem selv hårde materialer
 - Slank, fleksibel fingerbeskytter
 - Udskiftelige skæreblade
- Håndtag kan betjenes med en hånd
- Ledningsfri. Anvender 4 AA-batterier

Indeholder

- GEM II fingerringskærer
- Fingerbeskytter
- 1 x rødt skæreblad til hårde metaller
- 1 x blå skæreblad til bløde metaller
- Instruktions-DVD
- Instruktionsmanual



GEM II kan anvendes med to forskellige skæreblade



Blåt skæreblad er til bløde metaller som guld, sølv, messing, kobber, plast og aluminium.



Rødt skæreblad er til hårde metaller som titanium, platin, rustfrit stål, tungsten og jern.



Varenumre

GEM II	A-Z 300
Skæreblad, ekstra til hårde metaller	A-Z 223
Skæreblad, ekstra til bløde metaller	A-Z 224
Fingerbeskytter	A-Z 525
Fingerringspreder	A-Z 240